



Univox[®] SmartLoop

Portabel slingförstärkare med inbyggd hörslinga

Bruksanvisning



Art nr 202090


Introduktion

Tack för att du valt Univox® SmartLoop bärbara hörslinga, den portabla slingförstärkaren! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd! SmartLoop erbjuder mångsidig hjälp till hörapparatsanvändare vid otaliga situationer och platser som kräver korta eller längre enskilda möten eller möte med flera deltagare/talare. Enheten drivs av ett uppladdningsbart litium-polymerbatteri och är alltid redo för omedelbar användning. Inga installationsarbeten krävs.

SmartLoop-paketet innehåller:

- Univox® SmartLoop
- DC-nättaggregat och sladd
- Monteringsfot
- Informationsskylt med T-symbol
- Kardborreband
- Bruksanvisning

Säkerhetsföreskrifter och underhåll

 Installatören/projektören ansvarar för att produkterna installeras så att ingen risk för brand kan uppstå. Varken sändare eller nättaggregat får täckas över. Installera endast sändaren i ett torrt och välventilerat utrymme. Öppna ej enhetens hölje, då det kan innebära risk för elstötar. Använd endast den medföljande nätadaptern. Enheten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.


Garanti

Produkten omfattas av 2 års garanti. Utrustningen ska installeras enligt anvisningarna i detta dokument. Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Service


Om produkten inte fungerar ska den lämnas till försäljningsstället. Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB ska sändas med företagspaket eller motsvarande till: Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö.

Miljö och återvinning

 Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Bruksanvisning

1. Enheten kan läggas, ställas eller monteras under skrivbord/reception. För optimal prestanda bör SmartLoop placeras mellan hörapparatsanvändaren och personen som talar - räckvidden är inom ca 1m.
2. Ställ strömbrytaren (6) på "ON" för att slå på enheten. Strömindikatorn (5) lyser blått. Enheten kan drivas med det inbyggda batteriet eller medföljande nätadapter. (8).
3. SmartLoop har en inbyggd elektretmikrofon men kan även användas med ett externt headset eller en konferensmikrofon ansluten till 3,5mm-ingången (2). Justera ljudnivån med nivåkontrollen(4). Fyra nivåinställningar är tillgängliga inom Min-Max-området. Ställ omkopplaren på "Min" och tala normalt för att kontrollera ljudnivån. Hörlursuttaget (3) är en direkt återspeglning av slingans signalström och ljudkvaliteten kan enkelt bedömas genom att koppla in hörlurar. Justera nivån om det behövs.

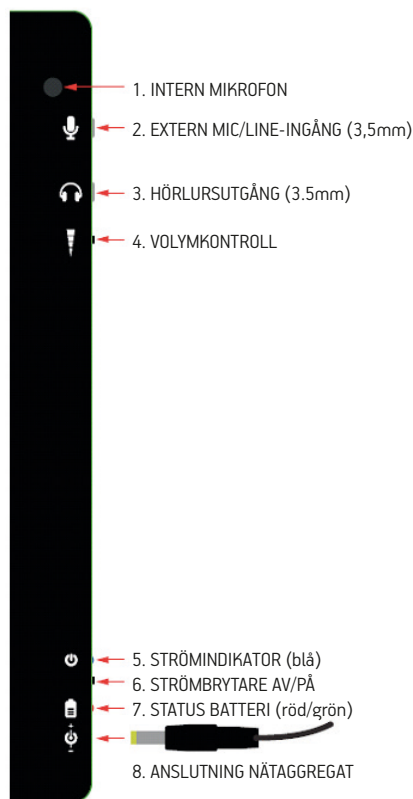

Batteriladdning

Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart Li-polymerbatteri. Ladda batteriet i minst 3 timmar innan du använder enheten för första gången. För att ladda, anslut den medföljande nätadaptern till DC-ingången (8). Fulladdat batteri ger ca. 14 timmars användning.

Batteriets status LED (7) indikerar stadigt rött när laddning krävs. Koppla in det externa nätaggregatet, status-LED lyser grönt, vid full laddning slocknar grön LED. För att säkerställa full batterikapacitet och optimal prestanda bör enheten vara ansluten till nätadaptern hela tiden, om möjligt.

Tekniska data

Strömförsörjning	Inbyggt litium-polymerbatteri Externt nätaggregat ingår Energiförbrukning	36mA@12V
Batteritid	Användning Laddningstid	Upp till 14 tim 3 tim
Ingångar	Inbyggd mikrofon Extern mikrofon/linje Phantomspänning Mik/Linje-känslighet Max ingångsnivå	Maxeffekt vid 70dB SPL@1m 3.5mm-ingång 12V 5mV-1.5Vrms, -45dBu 1.5Vrms (+5.7dBu)
Utgångar	3,5mm-hörlursutgång	
Uteffekt hörslina	Fältstyrka (125ms rms) max 400mA/m@1m avstånd	
Distorsion	<1%	
Dubbelverkande AGC	Dynamiskt område Insvängningstid: 2-500ms	> 50-70dB (+1.5dB) Utsvängningstid: 0.5-20dB/s
LED-indikering	Ström På/Av Batteriladdning	
Mått	(B) 299 x (H) 248 x (D) 15mm	
Vikt	500g	
Monteringsalternativ	Aluminiumfot Kardborrefäste	
Art nr	202090	

Tillbehör

Art nr	Beskrivning
241602	M-2 Svanhalsmikrofon, för bord, 3,5mm
242420	AVLM5 Mikrofon, för väggmontage, 3,5mm
241280	CBL 410 PCC Konferensmikrofon, 3,5 mm



Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se